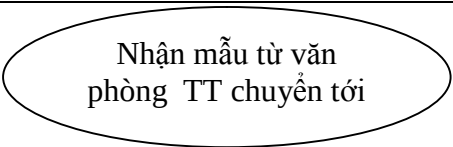


	HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC VẬN HÀNH MÁY ĐO pH (pH 8417N)	Mã hoá: HD/6.3f/TT.CNQLMT&TN
		Ban hành lần: 01
		Hiệu lực từ ngày: 28/5/2010
		Trang/ tổng số trang: 1 / 2

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn công việc vận hành máy đo pH (pH 8417N) được áp dụng cho các cán bộ thuộc tổ Phân Tích - Trung tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường & Tài Nguyên- Trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.

2. NỘI DUNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC	KIỂM TRA	TÀI LIỆU LIÊN QUAN
 ↓ Bật công tắc khởi động máy (cắm điện vào nguồn) ↓ Chờ thời gian 10 phút cho máy ổn định mới tiến hành đo ↓ Calibration điện cực: Tiến hành trước khi đo mẫu: - Rửa sạch điện cực bằng nước cất, lau khô điện cực trước khi calibration; - Nhấn nút [Cal] 2 lần, màn hình hiển thị “t1” cho điện cực vào dung dịch chuẩn pH=7 để yên trong 1 phút; - Tiếp tục nhấn nút [Cal] 2 lần, màn hình hiển thị “t2” cho điện cực vào dung dịch chuẩn pH=4 để yên trong 1 phút; - Tiếp tục nhấn nút [Cal] 2 lần – màn hình báo “exit”, kết thúc quá trình calibration - rửa điện cực bằng nước cất	- Tuyệt đối không tự vận hành thiết bị khi không có sự đồng ý của cán bộ phụ trách. - Phải đọc kỹ quy trình vận hành máy. Khi xảy ra sự cố phải báo ngay cho các bộ phòng thí nghiệm. - Không tự ý di chuyển máy móc, thiết bị trong phòng thí nghiệm. - Phụ trách thiết bị phòng thí nghiệm.	- Tài liệu: catalogue theo máy. - Hướng dẫn sử dụng máy đo pH (pH 8417N)

	HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC VẬN HÀNH MÁY ĐO pH (pH 8417N)	Mã hoá: HD/6.3f/TT.CNQLMT&TN
		Ban hành lần: 01
		Hiệu lực từ ngày: 28/5/2010
		Trang/ tổng số trang: 2 /2

↓ – Tiến hành đo mẫu: cắm điện cực vào dung dịch cần đo và ghi lại số liệu hiển thị trên màn hình, với mẫu huyền phù thì phải đo trong khi lắc hoặc sau khi vừa lắc xong; – Cứ 20 mẫu thì tiến hành calibration lại một lần. ↓ – Sau khi đo xong toàn bộ mẫu, rửa lại nước cất cho điện cực; – Ngâm điện cực trong dung dịch bảo quản điện cực; – Tắt máy; – Vệ sinh khu vực xung quanh máy. – Ghi vào sổ vận hành thiết bị ↓ Chuyển kết quả phân tích cho văn phòng trung tâm	- Định kì kiểm tra tình hình hoạt động của máy 3 tháng/lần. (Đơn vị ký hợp đồng bảo trì).	
---	--	--

3. HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ	Mã số biểu mẫu	Thời gian lưu	Nơi lưu	Phương pháp hủy	Người/bộ phận chịu trách nhiệm
1	- Sổ theo dõi sử dụng máy	Không mã hóa	3 năm	TT	Xé bỏ	PTN
2	- Giấy tiếp nhận mẫu	Không mã hóa	3 năm	TT	Xé bỏ	PTN
3	- Giấy báo kết quả	Không mã hóa	3 năm	TT	Xé bỏ	PTN
4	- Biên bản kiểm tra bảo trì thiết bị	Không mã hóa	3 năm	TT	Xé bỏ	PTN



HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

VẬN HÀNH MÁY ĐO pH (pH 8417N)

Mã hoá: HD/6.3f/TT.CNQLMT&TN

Ban hành lần: 01

Hiệu lực từ ngày: 28/5/2010

Trang/ tổng số trang: 3 /2

PHIẾU BÁO KẾT QUẢ MÁY ĐO pH (pH 8417N)

KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ CHO MẪU ĐÃ MÃ HÓA

Ngày nhận mẫu:

Ngày trả kết quả:

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

STT	Tên mẫu	Chỉ tiêu phân tích	Kết quả phân tích	Phương pháp phân tích
1				
2				
3				
4				

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 20.....

Phụ trách PTN

Người thực hiện

BIỂU MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG VẬN HÀNH
MÁY ĐO pH (pH 8417N)

[illegible]

(*): Giáo viên, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên,...